

# 始まる、心地良いストーマライフ



心地良い  
ストーマライフへの導きは、  
扱いやすさと  
安心感から…

Soft  
凸の高さ  
**4mm**  
やわらかく、しなやかな  
面板

NEW

やわらか凸  
シャロー  
イレオ

## やわらか凸 シャロー イレオ NEW



【その他のやわらか凸シャローシリーズ】  
ドレーナブルパウチ(マジックテープ式)

### ●やわらか凸 シャロー (消化管用)

残渣物(キャップへの便の  
目詰まり)が多い場合に  
お勧めします

※面板の形状、サイズ展開は  
やわらか凸 シャロー イレオと  
同様です。





### カスタムカット(クリップ\*21個付)

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	リングサイズ	入数	本体価格*
423513		10mm	28mmまで	S		
423512	肌色*1	15mm	40mmまで	M	10枚	7,800円
423511		20mm	47mmまで	L		

カスタムカット サイズ	10-28mm インサートサイズ:S	15-40mm インサートサイズ:M	20-47mm インサートサイズ:L
----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

### プレカット(クリップ\*21個付)

注文番号	色	既製孔サイズ	ストーマサイズ	リングサイズ	入数	本体価格*
423516		25mm	40mmまで	M		
423517		30mm	40mmまで	M		
423518	肌色*1	35mm	40mmまで	M	10枚	7,800円
423514		40mm	47mmまで	L		
423515		45mm	47mmまで	L		

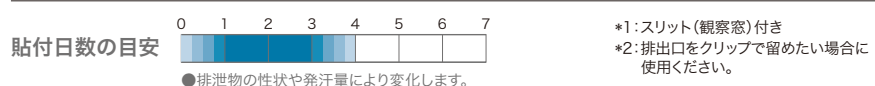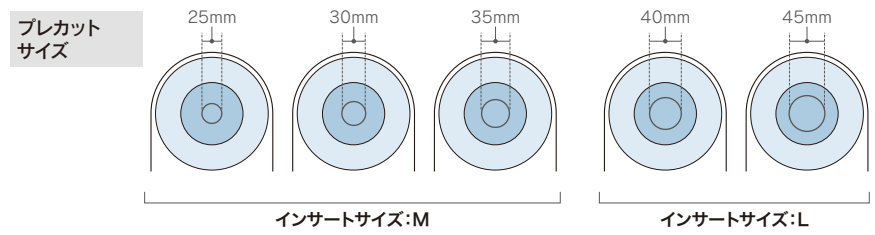

## ストーマ保有者の皆様へのお悩み相談サイトのご紹介



### 『コンバテッククラブ』とは

ストーマ保有者と支援者の方々に、よりよいサポート  
することを目的とした会員制のコミュニティークラブで  
す。会員の皆様には、専用のWEBサイト・メールを通  
じて、お役立ち情報の提供やストーマケアに関するご  
相談に対応いたします。様々なサービスを通して、皆  
様のストーマライフを応援いたします。

入会金  
年会費  
無料

### 会員登録は、コンバテッククラブ専用WEBサイトから カンタン4ステップ!

#### ステップ1

- スマートフォンなどでQRコードを読み込む
- インターネットで検索の場合は  
「コンバテッククラブ」で検索
- 下記URLを入力して  
<https://www.convatec-club.jp/>



いずれかの方法で「コンバテッククラブ」へアクセス。

#### ステップ2

トップページの  
「ご入会はこちら」を  
タップして  
「新規会員登録」を  
タップ

#### ステップ3

「ストーマ保有者、  
ご家族・その他」  
または「医師、看護師、  
介護職員」を選択して  
必要事項を記入し  
送信

#### ステップ4

ご承認メール  
が届きます。  
これで  
登録完了!

1) ストーマ・排泄リハビリテーション学会用語集 第4版、日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会編、東京、金原出版、2020、p151、164-165。  
2) 吉川隆造、最近の皮膚保護剤について组成的分類表の作成、日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会誌、Vol.2、No.2、JUN2007、p.3-7

薄く、よりしなやかに

# やわらか凸 シャロー イレオ

高さ4mmの「凸型形状面板」+  
「キャップ式排出口」が生み出す  
快適なケアへの導きと安心感



Soft  
凸の高さ  
**4mm**

NEW

やわらか凸  
シャロー  
イレオ

# やわらか凸 シャロー イレオから 始まる、心地良いストーマライフ

## イレオストミー（水様便）のケアに適した4つの特長

 <p><b>シンプルケア</b></p>	 <p><b>凸型形状面板</b></p>	 <p><b>素早い密着</b></p>	 <p><b>ソフトな追従</b></p>
<p>大口径で ミルキングしやすい 11mmのキャップ式排出口</p> <p><b>簡便な排出</b></p>	<p>高さ4mmの 凸型形状面板が、近接部 への軽い押さえを実現</p> <p><b>漏れを防ぐ</b></p>	<p>初期粘着性の良さ 密着性・追従性に優れた やわらか皮膚保護剤</p> <p><b>肌を守る</b></p>	<p>やわらかく、しなやかな 面板が、様々な動きや 腹壁形状に柔軟にフィット</p> <p><b>着け心地の良さ</b></p>

やわらか凸 シャロー イレオの持ち合わせる4つの特長は、  
様々な生活の変化にも柔軟に対応できる大切なポイントです。

特有の「凸型形状面板」や大口径の「キャップ式排出口」で“漏れを起こしにくく、扱いやすいこと”  
それらは安心と快適を提供し、快活なストーマライフをサポートいたします。

漏れを防ぐ

シンプルケア

快適と安心の日常へ



Soft  
4凸の高さ  
mm

## やわらかく、しなやかな「凸型形状面板」（軟性凸面型分類）


凸型形状面板は、  
“軽い押さえと、着け心地の良さ”を  
兼ね備えます。

高さ4mm

軽い押さえ

着け心地の良さ

高さ4mm、そして圧をかけすぎない  
ゆるやかな角度

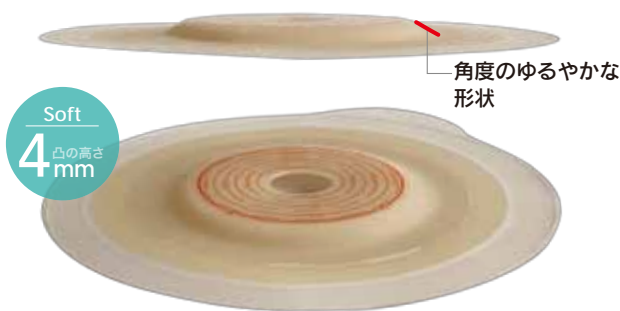


Soft  
4凸の高さ  
mm

角度のゆるやかな  
形状

折りまげること可能な面板は、  
ストーマ直視下での容易な貼付が可能




軽く押えの効く、しなやかな面板は、  
着け心地良く、さまざまな腹壁に密着・追従

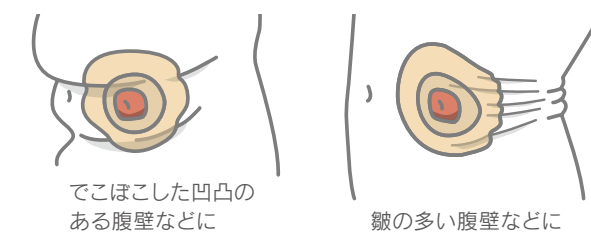

でこぼこした凹凸の  
ある腹壁などに

皺の多い腹壁などに

やわらかく、しなやかな面板による“軽い押さえ”が、  
浅い皺やくぼみを幅広く補正

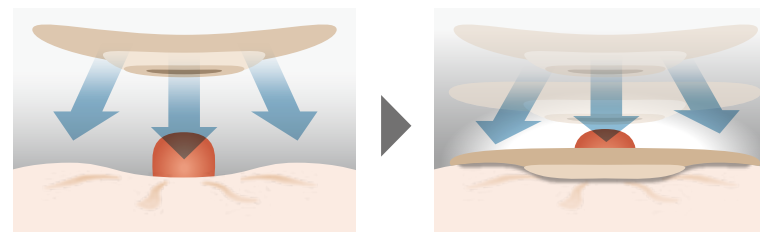

## より安心して簡便なイレオストミーケアを、 様々な特長がサポートします

### 1 初期粘着性の良さ、密着性・追従性に優れた「やわらか皮膚保護剤」 (CPGbs系<sup>1)</sup> / CPBS系<sup>2)</sup>)

肌への優しさと耐久性、2つのメリットを兼ね備えたやわらか皮膚保護剤は、  
貼付直後より、水様便の刺激から肌を守ります。

優れた皮膚密着

素早く肌に貼りつく  
安心感

スーパースリム  
フィット構造

捲れ上がりを防ぎ、  
身体の動きにしっかり追従

皮膚保護性と  
耐久性の両立


排泄物から肌を守り、  
貼付期間を維持



### 2 イレオストミーケアを容易にする、大口径「キャップ式排出口」


簡便な排出

やわらかい大口径 (11mm)  
キャップ式排出口

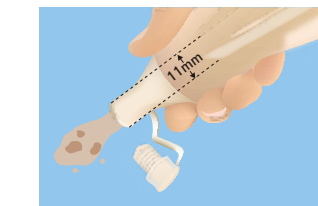

ミルキング  
しやすい

排出口上部の幅が、  
40mmとワイド設計

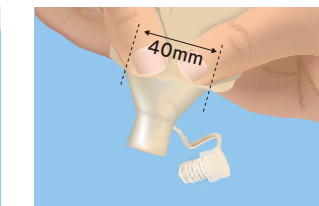

衛生的


周りをクルッと  
拭き取れる排出口



この付け根が排出口  
より離れているため  
クルッと拭き取りやすい。

つまみやすい

厚さ9mm、滑りにくい  
くびれ形状のキャップ

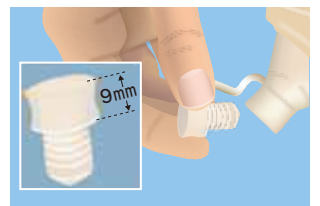

### 3 ユーザー目線に立って工夫、設計された様々な特長

不織布

ストーマ袋の両面  
に、やわらかく撥  
水性に優れた不  
織布を採用。



スリット（観察窓）

ストーマを観察  
しながら装具  
貼付が可能です。  
貼付後もス  
トーマや排泄  
物の状態を確  
認できます。




ベルトタブ

より固定力が必要な  
際は、ベルト装着が  
可能です。装具の安定  
した装着感を高め、  
安心感を提供します。  
アクティブな方にも  
おすすめです。



消臭フィルター


半透過性膜のメン  
ブレンがガスのみ  
透過させ、水分の  
透過を防ぎます。

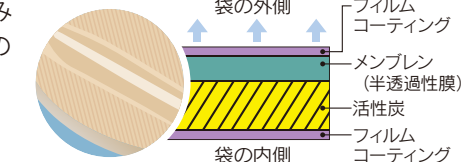

●フィルターの断面図  
袋の外側  
フィルムコーティング  
メンブレン (半透過性膜)  
活性炭  
フィルムコーティング  
袋の内側

フィルター保護構造

ストーマ袋の中を多  
層構造化し、便汁か  
らフィルターを保護  
します。ストーマ袋  
の中に仕切りのフィ  
ルムが1枚あり、C字  
の切れ込みからガス  
が通過します。

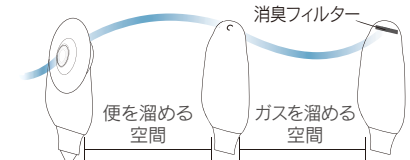

※入浴・シャワー・水泳などの際は、付属の  
フィルターシールをフィルターに貼付して  
ください。